

リーマ


医療機器届出番号 09B1X00006010010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管リーマ
 販売名 マニ-リーマ

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15～40, #45～80, #90～140 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
06	0.06	
08	0.08	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	
90	0.90	
100	1.00	
110	1.10	
120	1.20	
130	1.30	
140	1.40	

ラバーストップバー：18mm 21mm 25mm 28mm 31mm


作業部長 (L)

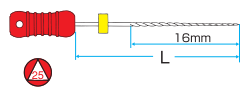

L=18mm(#15～40),
21mm, 25mm, 28mm, 31mm

使用方法

リーミング (reaming)
1/4 ～ 1/2 回転切削

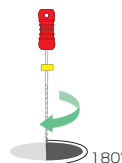

刃部拡大図



横断面形状

- # 06 ～ 40
- # 45 ～ 140

用途

根管の拡大形成や創傷清拭
などに使用

18 mmファイル

根管の長さは個体差があり、成長過程でも異なっています。18 mmファイルは小児などの短い根管に有効です。