

Kファイル


医療機器届出番号 09B1X00006011010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
 販売名 マニー Kファイル

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #15~40, #45~80, #90~140 ■材質: ステンレススチール ■テーパー: 2/100

サイズ	先端径 (mm)	
06	0.06	
08	0.08	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	
90	0.90	
100	1.00	
110	1.10	
120	1.20	
130	1.30	
140	1.40	

ラバーストッパー: 18mm □ 21mm ◻ 25mm ◻ 28mm ◻ 31mm ◻


■ 作業部長 (L)

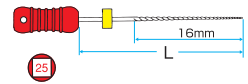


L=18mm(#15~40),
21mm, 25mm, 28mm, 31mm

■ 使用方法

リーミング (reaming) 1/4回転切削+
ファイリング (filing) 牽引切削

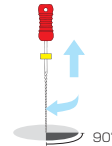

■ 刃部拡大図

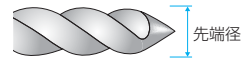

■ 横断面形状

06 ~ 40 ■
45 ~ 140 ▲

■ 用途

根管の拡大形成などに使用

18 mmファイル

根管の長さは個体差があり、成長過程でも異なっています。18 mmファイルは小児などの短い根管に有効です。