

MANI®

針付縫合糸・縫合針
Sutures · Surgical Needles



MANI, INC.

FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —



Sutures Surgical Needles




For advanced treatment ——— We serve with micro processing technology

SURGICAL NEEDLES マニーアイド縫合針

角 針 逆角針			丸 針		
角弱	逆角弱	角直	丸弱	丸直	
24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	
21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	
18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	
15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	
角強	逆角強	角先曲	丸強	丸先曲	
24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	24 D-0.68mm	
21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	21 D-0.68mm	
18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	18 D-0.58mm	
15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	15 D-0.53mm	


バネ孔(弾機孔)

糸を傷めにくい入口

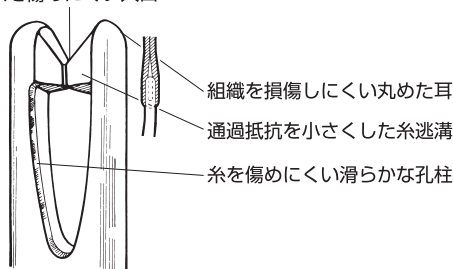


MANIのバネ孔(弾機孔)は、縫合組織を傷めにくい丸めた耳、通過抵抗を少なくする糸逃溝を有していると共に、糸を損傷しない糸入口となめらかな孔柱にしていますので、ナミ孔(普通孔)の必要性を感じさせません。

角 針

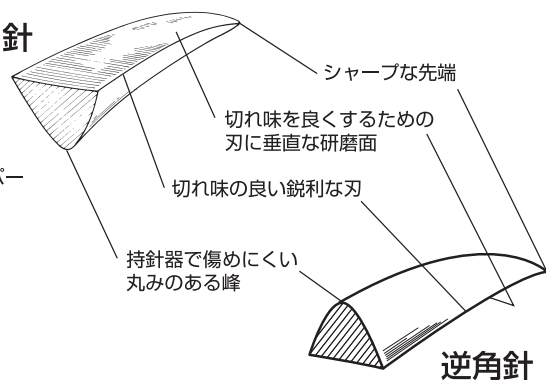

丸 針

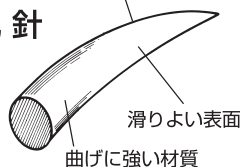

標準価格(10本入)
 ・全形態……2,100円

●耐蝕性に優れ、適度な靱性と硬度を併せ持った「マニー・ハードファイバーステンレススチール」を採用。



注意

縫合針のご使用に際して ●本製品は医療機器です。縫合以外の目的には使用しないでください。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●本製品の再使用は行わないで下さい。●針折れ、糸切れの原因になりますので、バネ孔部近くは把持しないでください。●持針器は使用前に適したサイズ、機能のものをご使用下さい。●予め患者の口腔外で変形、キズ等が無いか確認して下さい。変形した針、キズの付いた針は折れの原因となりますので、使用しないで下さい。●針刺し事故に充分注意してご使用下さい。●ご使用後は医療廃棄物として適切な処理をして下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売 **MANI**
 MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811(代)
 【歯科営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593
 Exp.Sec./Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161