














販売終了製品


エンジンHファイル

医療機器認証番号 22000BZX01625000
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニーエンジンHファイル

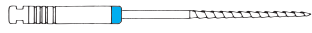■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15～40, #45～80 ■材質：ステンレススチール ■テーパ：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	

■ 作業部長 (L)

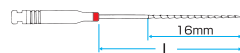

L=21mm,25mm

■ 使用方法


上下運動専用のコントラヘッドに装着し、許容回転数 800min⁻¹ 以下で使用



■ 刃部拡大図



■ 横断面形状

10～80 

■ 用途

根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる

● ● ● 関連商品 ● ● ●

手用タイプは…

Hファイル  …P 12

■ 標準価格 (6本入)

#10～40	#45～80
¥1,750	¥2,200