

MANI®

FOR ADVANCED TREATMENT

SEC O-FILES



MANI, INC.




For advanced treatment — We serve with micro processing technology

SEC O-FILESは先端が丸い。 根管のLEDGEを防ぎます。

O-FILESは先端を丸く加工してありますので、根管にLEDGEをつくらずに、根管に沿ってスムーズに進んでいきます。

このO-FILESは、通常のK-FILESやH-FILESに改良を加えたもので、
SYSTEMATIC ENDODONTICSの「SEC1-0」用に考案されたものですが、
従来のKおよびH-FILES以上に真直根管にも彎曲根管にも効果的に使用することができます。

The tip of SEC O-FILES is designed to prevent ledging and perforation in root canal preparation.


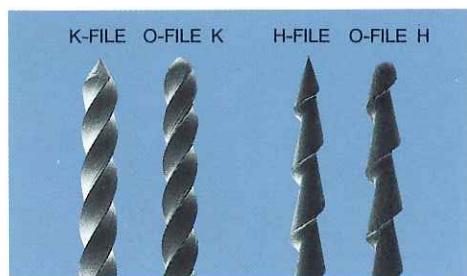


◀O-FILESの丸い先端は通常のKやHファイルとは違います。この違いが根管形成の安全性と確実性を生み出します。

The tips of O-FILES are different from the conventional ones. The rounded tip makes your canal preparation safe and reliable.

O-FILESの丸い先端は彎曲した根管壁面に沿って滑るように進みますので、手指ばかりでなく、器械による根管形成にも安全に使えます。

The tip of O-FILES slides on the outer wall of curved canal so that O-FILES enables the canal to prepare safely not only by hands but also mechanically.

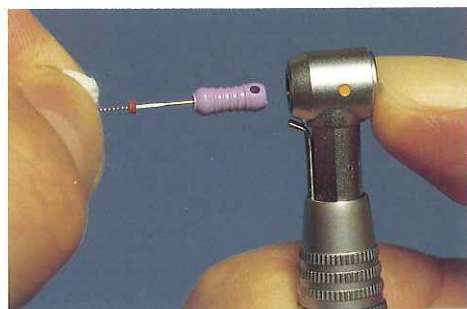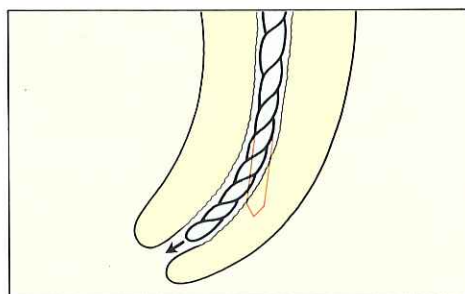

◀O-FILESのハンドル直径は4mmで、ハンドル保持部の直径をISOに準じている「SEC 1-0」のヘッドにワン・タッチで着脱できます。O-FILESのハンドルは乾熱滅菌に耐え、変形や変色はありません。

The handle diameter of O-FILES, based on ISO, is 4.0mm (+0, -0.05) and is attached to 「SEC-1-0」 head with one motion.

The handle of O-FILES withstands dry heat sterilization up to 200°C without any deformation or discoloration.

SEC O-FILES					
Type K		SIZE	Color	SIZE	Color
		※08 (00)		30 (4)	
Type H		10 (0)		35 (5)	
		15 (1)		40 (6)	
		20 (2)		45 (7)	
		25 (3)		50 (8)	
				55 (9)	
				60 (10)	
				70 (11)	
				80 (12)	
				※Type K ONLY	

Length (L) : 21,25mm
Packed : 6 pcs. to a package
Size : 6 pcs. of one size



SEC O-ファイルのご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●予め患者の口腔外で変形・キズ・ヒビ等が無いか確認して下さい。●器械切削時には専用のSEC1-0ヘッドをご使用下さい。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 D1110031210



743 NAKAAKUTSU TAKANEZAWA-MACHI TOCHIGI-KEN, 329-1234 JAPAN

●Phone : 81-28-675-3311 ●Facsimile : 81-28-675-4256

●E-mail : dental.exp@ms.mani.co.jp ●Homepage : www.mani.co.jp